





**Iškvėpimo pradžia.** Iškvėpimo pradžioje, oro sraute vyrauja anestetikas ir CO<sub>2</sub>.



**Iškvėpimo pabaiga.** Iškvėpimo cikle, didžioji dalis anestetikų yra absorbuojami reflektoriaus, kuomet per jį keliauja CO<sub>2</sub>.

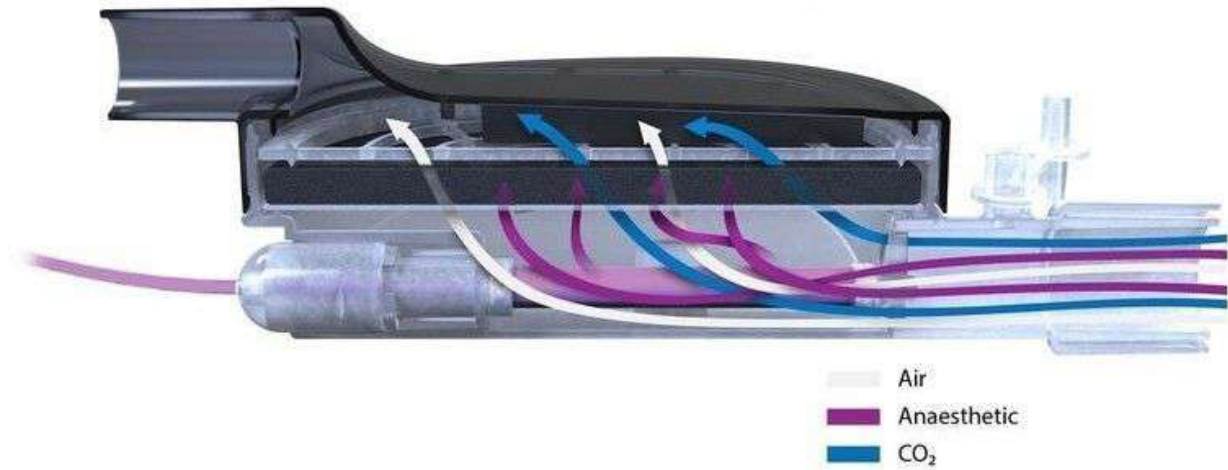

**Įkvėpimo pradžia.** Įkvėpimo pradžioje oras yra transportuojamas iš ventilatoriaus per AnaConDa.

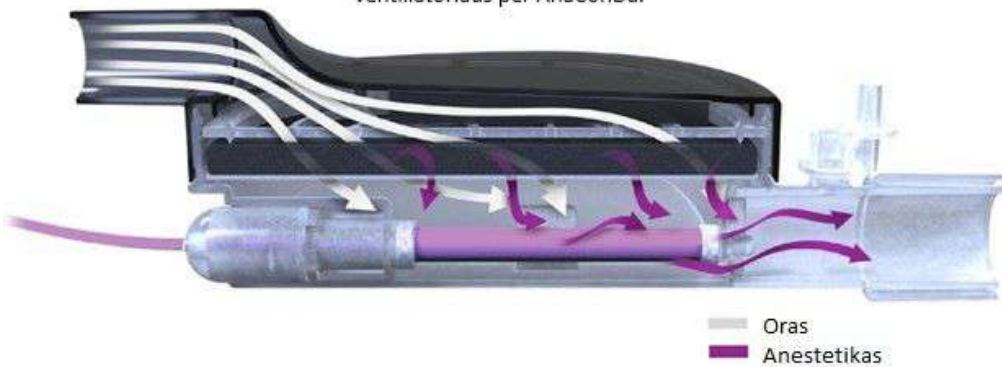

**Įkvėpimo pabaiga.** Įkvėpimo metu absorbuotas anestetikas išlaisvinamas ir iš naujo patenka į paciento kvėpavimo takus.

